


CoolCut™

Cuchillas y fresas para pequeñas articulaciones

Disector (Hub pequeño)



Fresa ovalada (Hub pequeño)

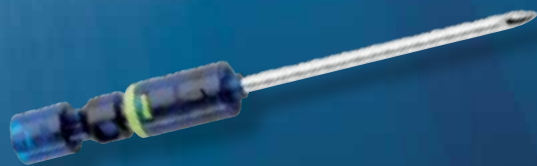

Torpedo™ (Hub grande)



Pieza de mano Synergy del shaver para pequeñas articulaciones



Consola Synergy Resection

Consola y accesorios para resección

Consola Synergy Resection

Este sistema versátil fue diseñado para múltiples procedimientos ortopédicos, presenta una interfaz de usuario táctil, diversos modos de oscilación seleccionados por el usuario y canales dobles que permiten la operación de varias piezas de mano. Ambos canales pueden operar en forma individual con un pedal o simultáneamente el uso de un segundo pedal.

Opciones de interruptor de pie: interruptor de bajo perfil

El diseño del interruptor de pie de bajo perfil minimiza la fatiga del usuario y mantiene el control de todas las funciones. Las funciones de control direccional y aumento de velocidad se controlan presionando la almohadilla correcta. Al presionar el interruptor domo de alternancia, el control cambia entre los canales dobles de la consola.

Interruptores de pie multifunción inalámbricos y con cable

Los interruptores de pie multifunción inalámbricos y con cable tienen un modo de función que selecciona el usuario con el interruptor de pie de bajo perfil o con el interruptor de pedal a gas. Se accede a todos los controles de velocidad, dirección, cruce y alternancia en cualquiera de estos accesorios amigables para el usuario y el modo activo se muestra en la consola.

Opciones de pieza de mano del shaver: pieza de mano del shaver con control de pie

La pieza de mano del shaver para pequeñas articulaciones acepta la línea de cuchillas y fresas de hub pequeño. Su tamaño compacto y peso liviano son ideales para trabajar con máximo control y destreza.

La pieza de mano del shaver con control de pie es un accesorio de alta velocidad y alto torque. Incluye un portaherramientas con fijación a presión que es compatible con todas las cuchillas y fresas de hub grande, lo que la convierte en una de las piezas de mano más versátiles disponibles.

Piezas de mano del shaver con control manual

Estas piezas de mano de alta velocidad y alto torque ofrecen rendimiento y mayor versatilidad poniendo el control en la punta de sus dedos. Disponibles en dos ubicaciones, los botones multifunción con disposición ergonómica controlan la velocidad y la dirección.



Consola Synergy Resection - AR-8305



Interruptor de pie de bajo perfil - AR-8310



Interruptor de pie inalámbrico - AR-8315



Interruptor de pie multifunción con cable - AR-8315C



Pieza de mano del shaver con control de pie para pequeñas articulaciones - AR-8330SJ con Disector - AR-9350DS



Pieza de mano del shaver con control de pie - AR-8330F con Torpedo™ - AR-7400TD



Pieza de mano del shaver con control manual - AR-8330H, con Sabre - AR-7300SR



Pieza de mano del shaver con control manual, Backhand - AR-8330RH, con fresa ovalada - AR-7300OBT



Serie CoolCut® de Arthrex

Cuchillas y fresas para pequeñas articulaciones


Opciones de cuchillas y fresas de hub grande - Longitud de trabajo de 7 cm

Color de la familia de productos,
imagen y descripción de la cuchilla

2,0


3,0

4,0

| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
| <p>Cuchilla Torpedo™</p> <p>La punta cónica y el corte tipo tijera facilitan una resección de tejido blando agresiva y rápida</p>  | | | <p>AR-7400TD</p> |
| <p>Disector</p> <p>Excelente opción para resección agresiva de meniscos, tejido sinovial, cartílago y plicaturas</p>  | | <p>AR-7300DS</p> | |
| <p>Sabre</p> <p>Diseñada para una resección más agresiva de tejido blando en general que deje bordes lisos en el tejidos</p>  | <p>AR-7200SR</p> | <p>AR-7300SR</p> | |
| <p>Fresas ovaladas</p> <p>Diseñadas para resección rápida y agresiva de hueso en plastia de la escotadura, procedimientos en la clavícula distal y de descompresión subacromiales</p>  | | <p>AR-7300OBT 10-estrias</p> | <p>AR-7400OBE 8-estrias</p> |
| <p>Fresas redondas</p> <p>Ideales para resección de tejido blando, osteocondral y osteofitos o preparación del sitio óseo</p>  | | <p>AR-7300RBE 8-estrias</p> | <p>AR-7400RBE 8-estrias</p> |
| <p>Camisa sin capuchón, Fresas O/T</p> <p>Permite realizar la resección de hueso sin capuchón alrededor de la cabeza de la fresa mejorando la visibilidad y el acceso a los espacios apretados</p>  | | | <p>AR-7400HSO</p> |

La más agresiva

La menos agresiva

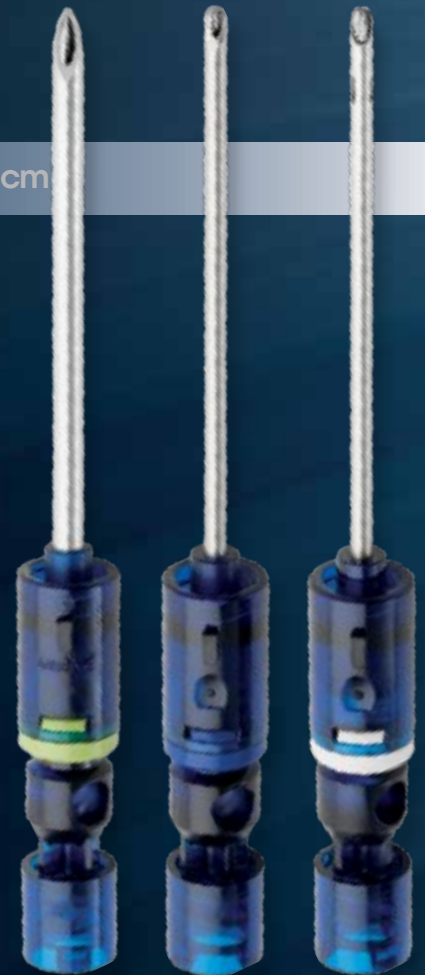

AR-7400TD


AR-7300DS

AR-7300OBT

Válvulas de succión de reemplazo para todas las piezas de mano

Todas las piezas de mano de shaver de Arthrex® cuentan con válvulas removibles para obtener el mayor nivel de limpieza, lo que reduce al mínimo el potencial de contaminación para los pacientes. El set de reemplazo de la válvula se completa con un empaque redondo que se puede comprar en caso de pérdida o daño. También hay disponibles empaques de repuesto, comercializados en paquetes de 10 unidades.

Opciones de piezas de mano tamaño estándar para pequeñas articulaciones

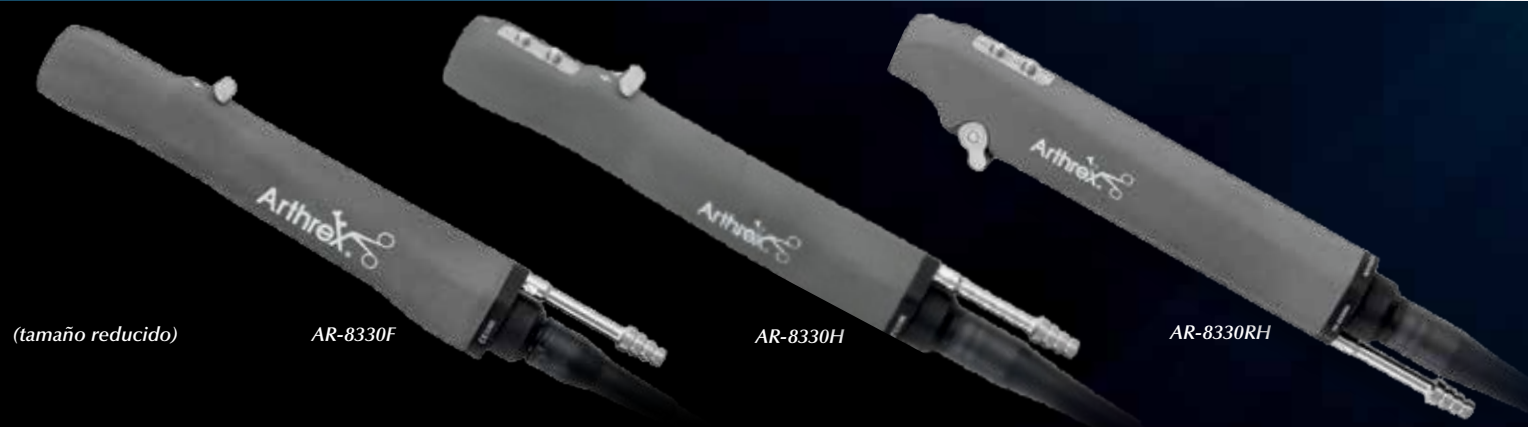

(tamaño reducido)

AR-8330F

AR-8330H

AR-8330RH

Opciones de cuchillas y fresas de hub pequeño - Longitud de trabajo de 7 cm

| Color de la familia de productos, imagen y descripción de la cuchilla | 2,0 | 3,0 | 3,5 |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Disector Excelente opción para resección agresiva de meniscos, tejido sinovial, cartílago y plicaturas  | | AR-9300DS | AR-9350DS |
| Sabre Diseñada para una resección más agresiva de tejido blando en general que deje bordes lisos en el tejido  | AR-9200SR | AR-9300SR | AR-9350SR |
| Fresas ovaladas Diseñadas para resección rápida y agresiva de hueso en plastia de la escotadura, procedimientos en la clavícula distal y de descompresión subacromiales  | | AR-9300OBT 10-estrias | AR-9350OBT 8-estrias |
| Fresas redondas Ideales para resección de tejido blando, osteocondral y osteofitos o preparación del sitio óseo  | | AR-9300RBT 10-estrias | AR-9350RBT 10-estrias |



AR-9200SR

AR-9300DS

AR-9300RBT

AR-8330V – Set de reemplazo de válvula para piezas de mano AR-8330F, H y RH

AR-8330VO – Empaque redondo de repuesto para set de válvula AR-8330V

AR-8330SJV – Set de reemplazo de válvula para pieza de mano AR-8330SJ

AR-8330SJO – Empaque redondo de repuesto para set de válvula AR-8330SJV




AR-8330SJV



AR-8330SJO

Opciones de piezas de mano de hub pequeño para pequeñas articulaciones

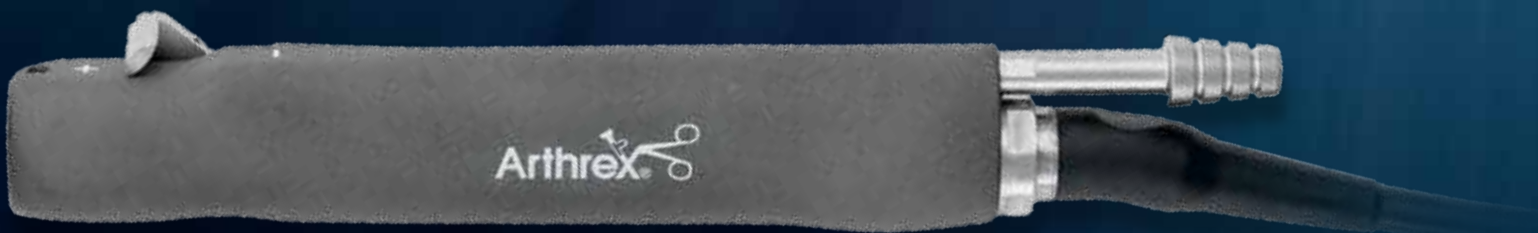

AR-8330SJ (tamaño real)